
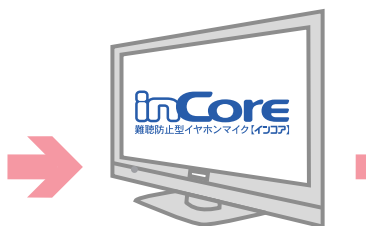



難聴の方へ インコアご活用の流れ

① テレビに接続して確認 (インコアはステレオ仕様です)

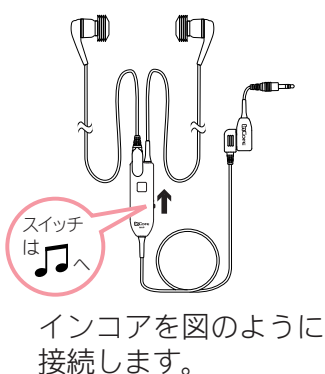

お持ちのテレビのイヤホン端子にインコアを接続します。
※ 場所の詳細はお手持ちのテレビ取扱説明書をお読みください。

音量は、テレビ本体およびリモコンで調節します。
従来のイヤホンとは異なり、小音量で十分に聴こえます。
大音量で聞かないでください。

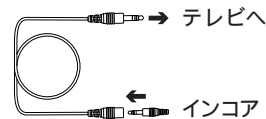



インコアのコードが短い場合は市販の延長コード(ステレオタイプ)をご使用ください。

△ 注意

ご使用のテレビがモノラルの場合は、インコアを接続しても両耳からは聴こえません。(片側からのみ)

O.K. 充分聞こえた場合 ▼ 次へ **チャレンジ!!**

② ラジオや音楽プレーヤーに接続して確認 (インコアはステレオ仕様です)

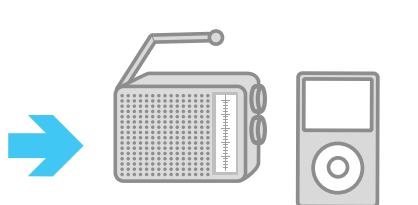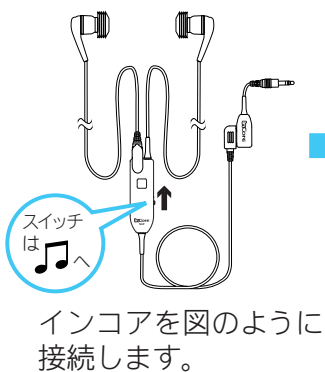

お持ちのラジオや音楽プレーヤーのイヤホン端子にインコアを接続します。

音量は、ラジオや音楽プレーヤーの本体で調節します。

※ 音量設定の詳細はお手持ちの機器類取扱説明書をお読みください。

△ 注意

ご使用のラジオや音楽プレーヤーがモノラルの場合は、インコアを接続しても両耳からは聴こえません。(片側からのみ)

インコアはしっかり密閉をすると小音量で十分に聴こえますので100dBを超えるような大音量は必要ありません。
※一部重度難聴の方はご使用いただけません。

O.K. 充分聞こえた場合 ▼ 次へ **チャレンジ!!**

③ 携帯電話に接続して確認

※参考 左耳:平均90dB、右耳:平均70~80dBの聴力の方が通話できています!

■ 携帯電話をお持ちの場合



同梱の「よく聞こえる3ステップ」の使用方法をご参照になり、通話相手の声の聴こえ具合をご確認ください。

平型コネクター仕様の携帯電話



音量は、携帯電話本体で調節します。

※ 音量設定の詳細はお手持ちの携帯電話取扱説明書をお読みください。

■ 携帯電話をお持ちではない場合

ご家族・ご友人の方がお持ちの携帯電話で左記「よく聞こえる3ステップ」の使用方法をお試しください。

■ 携帯電話の入手が困難な場合

ご自宅の固定電話での会話が可能な方(増幅器・補聴器を使用しない状態で)

➡ ④ へお進みください。

※ 携帯電話を新規ご購入または機種変更予定の方は、同梱の「適合機種表」耳マークの中からお選びください。

O.K. 充分聞こえた場合 ▼ 次へ **チャレンジ!!**

④ 補聴器をしのぐ集音機能で、テレビを見ながら周囲の人との会話も楽しめます。

※聴こえ方には個人差があります。